

# ●●(提出先)に鼻咽頭ぬぐい液を提出する

一番大切なことは採取者と検査担当者が**感染しないこと**で、  
検体をきちんととることはその次です！

## 1. (検査のオーダー方法)

## 2. 必要物品を●●(場所)に取りに行く

日勤帯のみ技師さんに「●●に鼻咽頭ぬぐい液の新型コロナウイルス感染症検査を提出したい」と伝え、必要物品を受け取る



3. 物品(Cセット)の確認  
ジップロック、ガーゼ、スワブ、パラフィルム、10ml生食シリンジ



4. 汎用ラベルを2枚打ち出し、1枚をスワブに、1枚をジップロックの外側に貼る




写真は各施設で撮影してください



## 5. 人手を集める 2名以上が必要です

6. 个人防护具をつける  
シールド付きマスク、袖付きガウン、手袋を着用

7. スワブの容器に生食を3ml入れる  
スワブを取り出し、**容器側に生食を3ml入れる**

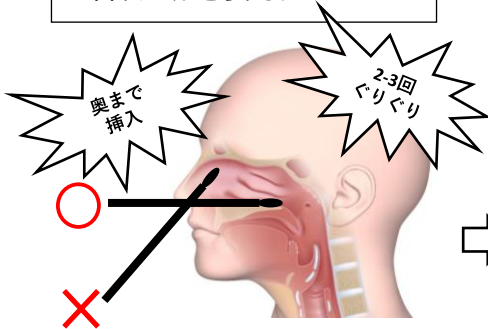

## 8. 鼻咽頭をぬぐう

下鼻甲介(外鼻孔から耳孔を結ぶ平面をイメージ)に沿わせながら、滅菌綿棒を鼻腔の奥に行き当たるまで挿入し、**数回擦る**のようにして粘膜表皮を採取する



9. 採取者①が、パラフィルムでシールするさらにガーゼでくるむその時、スピッツの底部が見えるようになる(スワブ容器に生食が入っていることがジップロックの外から確認できるようにするため)



10. 採取者②が持つ袋に、採取者①がスピッツを入れるこの際に、採取者①はジップロックを触れないこと

## 11. 个人防护具を脱ぐ

感染対策上は脱ぐときの方が重要です  
手袋→ガウン→シールド付きマスクの順に脱ぐ  
自分の身を守るための細心の注意を！！



12. 脱いたら必ず手指衛生

## 13. (検体提出方法)